



Epilátor IPL inFace

Bezbolestný | Hedvábná kůže | Bezpečný a pohodlný



Pulzní blesk IPL



900 000
záblesků



Pět nastavitelných
stupňů



Optický filtr

900 000 efektivních záblesků

Více než 900 000 efektivních záblesků, stav zobrazen na LCD displej.

Dva režimy záblesků podle vašeho výběru

Manuální režim jednoho záblesku, bezpečný a nepropustný, vhodný pro rty, podpaží, obličej, oblast bikin, atd.

Automatický režim záblesků, bez použití tlačítka, epilátor vytváří záblesky, vhodná pro odstraňování chloupků na stehnech, pažích, zádech atd.

Odstranění chloupků po celém těle


Nohy, podpaží, bikiny, paže, rty, záda.

Postup při používání


Použití po 1–2 týdnech (3krát týdně): Chloupky rostou pomalu a póry se zmenšují;

Použití po 3–4 týdnech (2krát týdně): tenké chloupky, slabá místa a skryté póry;

Použití po 4–8 týdnech (jednou za půl měsíce nebo 1 měsíc): Inhibuje opětovný růst vlasových folikulů, hedvábná a jemná pokožka, není třeba znovu odstraňovat.

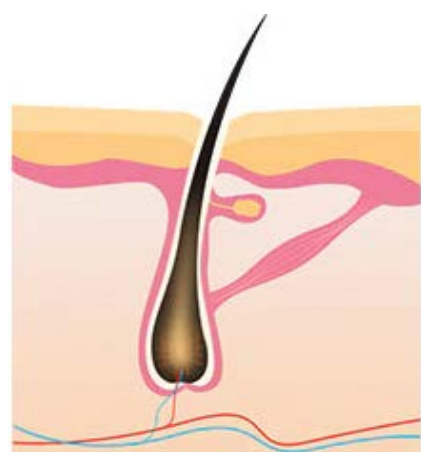

1-2 Týdny

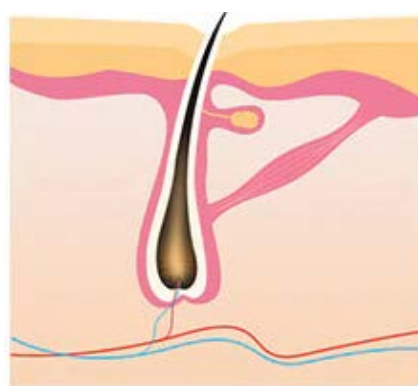


3-4 Týdny



4-8 Týdnů

Instrukce

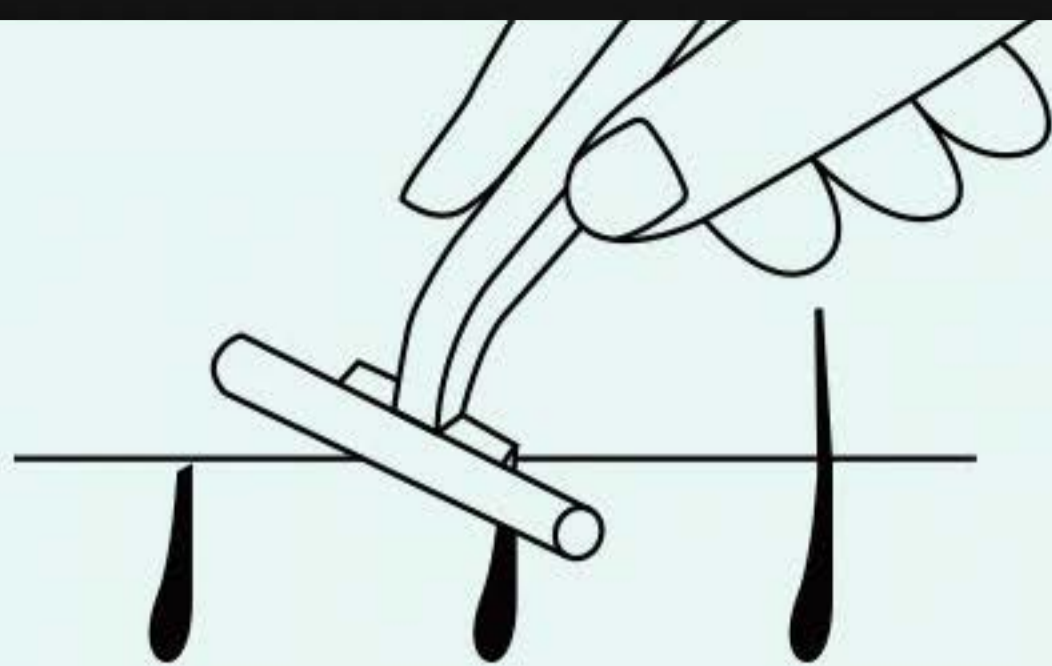

1. Krok

Pro odstranění chloupků použijte přiloženou žiletku

2. Krok

Použijte ochranné brýle, poté připojte napájecí adaptér a zapněte jej dlouhým stiknutím tlačítka




Hair color Skin color	Bílá	Červená	Béžová	Světle hnědá	Hnědá	Tmavě hnědá	Černá
Bílá	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Béžová	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Světle hnědá	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Hnědá	⊗	⊗	⊗	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3
Tmavě hnědá	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Černá	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

3. Krok

Nastavte odpovídající úroveň podle tabulky.


4. Krok

Přiložte epilátor k pokožce, krátkým stisknutím tlačítka odstraňte chloupky.

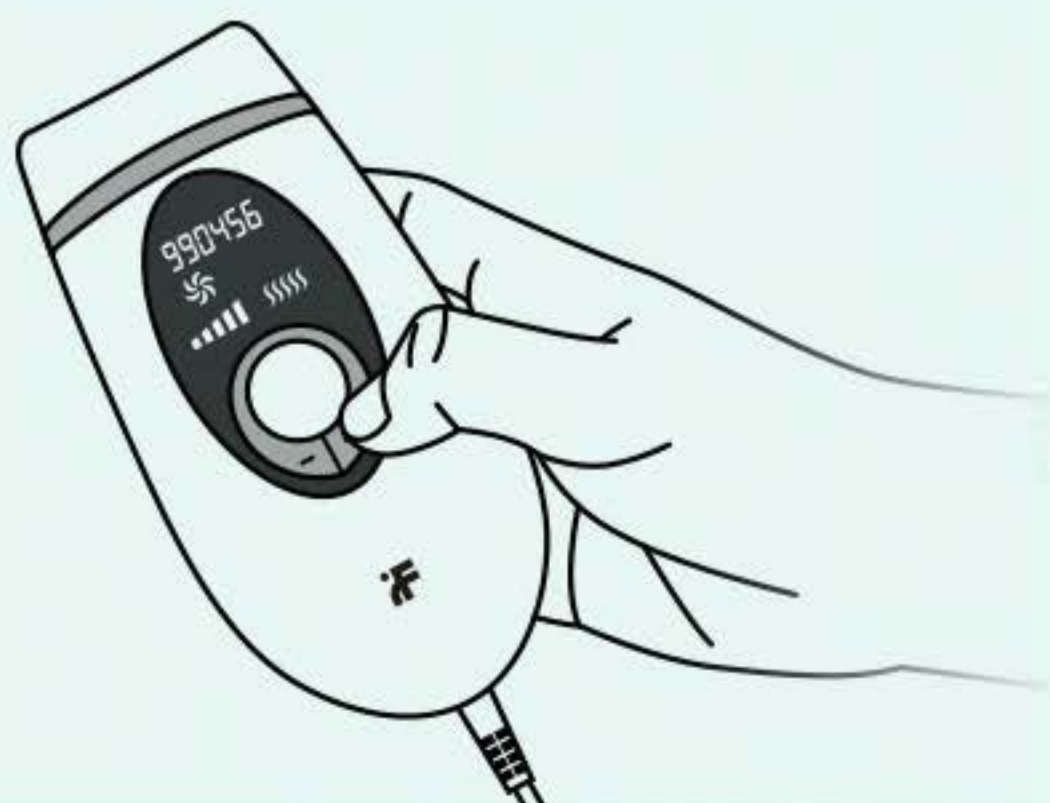


5. Krok


Nastavte příslušný režim (manuální / automatický) a pohybem odstraňte chloupky

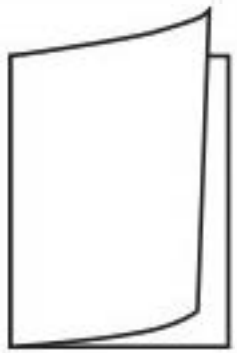


▼
Uživatelská příručka

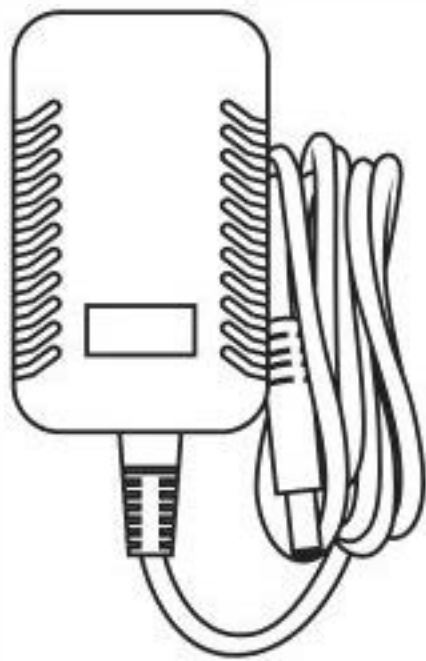

▼
DC napájecí adaptér

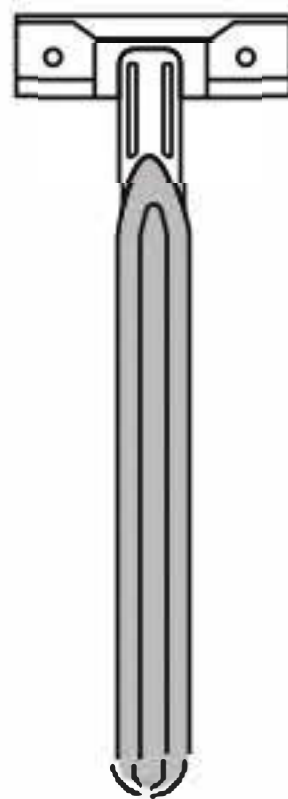

▼
Žiletka

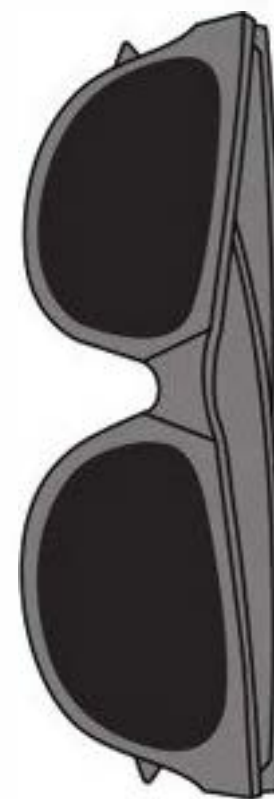

▼
Ochranné brýle

Záblesková drážka pro odstranění chloupků IPL

Zbývající záblesky

Stav ventilátoru

Tlačítko zapnutí / vypnutí
Zábleskové tlačítko

Úroveň! tlačítko dolů

Nabíjecí rozhraní



Automatický režim

Manuální režim

Úroveň! tlačítko nahoru

OBSAH BALENÍ

Otevřete krabici a najdete:

1. Odstraňovač chloupků IPL inFace [x 1]
2. Napájecí adaptér DC x 1
3. Uživatelská příručka
4. Oční ochranné brýle x 1
5. Břitva x 1

Specifikace

- Název produktu: Epilátor IPL inFace
- Model produktu: J-01D
- Napětí: 12V
- Výkon: 36W
- Skladovací teplota: 0 ° C - 40 ° c
- Provozní teplota: 5 ° C - 35 ° C
- Pracovní vlhkost: 30% - 85%
- Velikost balení: 240 * 148 * 71 mm
- Velikost: 148 x 75 x 41 mm



SERVA**T**TECH

Service and technology

Dovozce do ČR: Servatech s.r.o. Záběhlická 134/95 106 00 Praha 10
info@servatech.cz, 774 555 571