

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro chytrou váhu
Xiaomi Scale 2



Bezpečnostní pokyny a informace

- Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyndejte z ní baterie. Je-li plně váha ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

- Váhu nevystavujte povětrnostním podmínkám a používejte ji v uzavřených prostorech za pokojové teploty, jinak hrozí, že nebude pracovat správně.

- Nevhazujte váhu do ohně, jelikož může dojít k jejímu výbuchu. Dodržujte předpisy. Je-li to možné, recyklujte ji. Nevyhazujte ji do směsného odpadu.

- Váhu nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Váhu neupravujte a nevládejte cizí předměty.

- Používejte váhu pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozenou váhu.

- Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se určitě neměly dostat na standardní skládku.

Základní parametry


- Typ baterií: 4x AAA, 1,5V (nejsou součástí balení)
- Rozměry: 300 x 300 x 20mm, hmotnost: 1,6kg
- Konektivita Bluetooth 4.0
- Kompatibilita: OS Android 4.4 a výše, iOS 8 a výše
- Rozsah měření: 5 - 150kg, přesnost měření: 50g

Napájení Xiaomi Scale 2:

- Vespodní části váhy sejměte dvířka a vložte čtyři AAA baterie (nejsou součástí balení).
- Dbejte na správnou polaritu baterií!
- Používejte výhradně kvalitní baterie. V případě vytečení elektrolytu do váhy záruka zaniká.

Používání Xiaomi Scale 2:

- Pro spárování váhy s telefonem potřebujete aplikaci Mi Fit, sehnatelnou v Obchodě Play/App Storu.
- Po instalaci budete vyzváni k přihlášení k Xiaomi účtu, případně k přihlášení přes Facebook/Google.
- Po úspěšném přihlášení Vás již aplikace vyzve k přidání nového zařízení. Stačí vybrat „Váha Body Composition“ a řídit se instrukcemi na obrazovce. V zásadě stačí mít zapnuté Bluetooth a stoupnout si na váhu. Spárování poznáte tak, že se na displeji telefonu ukáže stejná hmotnost, jakou vám zobrazuje displej váhy.

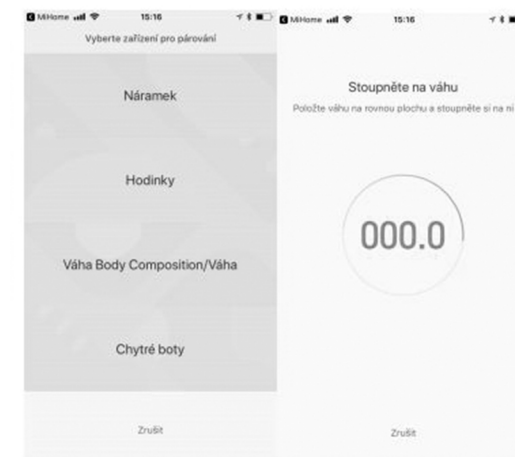

- Následně se vám po úspěšném spárování otevře nastavení váhy. Můžete si zvolit, jaké jednotky preferujete, zda se mají slučovat duplicitní záznamy, když se vážíte ráno několikrát, případně pod položkou „více informací o Váha Body Composition“ se dozvíte, jak se správně vážit.

- Jakmile vše nastavíte dle svých představ, tapněte vlevo nahoře na šipku zpěta v aplikaci Mi Fit se přepněte do hlavní obrazovky tapnutím na „Stav“ vlevo dole.




- Pokud tapnete na řádek „Váha“, otevře se Vám podsekcce se staršími daty vážení. Zároveň můžete přidat i dalšího člena rodiny, aniž by měl svůj telefon se spárovanou aplikací (pomocí tlačítka Plus vedle fotky vašeho profilu).

- Statistiky můžete oddalovat a přibližovat, přidat zápis o hmotnosti ručně, nebo vážit i malé dítě. Vše pomocí tlačítek ve spodním řádku.

- Pokud zvolíte naopak položku „Body score“, můžete vyčíst právě všechny ostatní veličiny, které tato váha měří – BMI, Tělesný tuk, Voda, Bazální metabolismus, Viscerální tuk, Svaly, nebo Kostní hmota. Ke všem veličinám máte popsáno, jestli je hodnota v pořádku, nebo by bylo dobré něco se sebou dělat. Dohromady získáváte určitý počet bodů, který můžete postupem času navyšovat.

- Pro správné měření všech veličin (tuk, svaly, kosti apod.) je nutné vážit se naboso, bez ponožek. Čtyři kovové senzory musí mít přímý kontakt s chodidly pro správné zvážení.

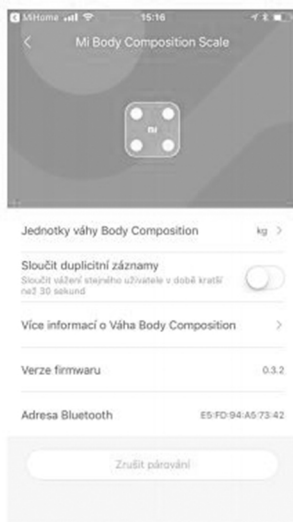

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodáváná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, HUAWEI, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovením Směrnic 1999/5/ES a 2014/53/EU

Dovozce produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, HUAWEI, OUKITEL, APPLE,
KEN XIN DA,
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEFONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

