




Návod k použití

Xiaomi WellSkins Ultrasonic Skin Scrubber / ultrazvuková špachtle

Před použitím si důkladně přečtěte návod

Popis produktu

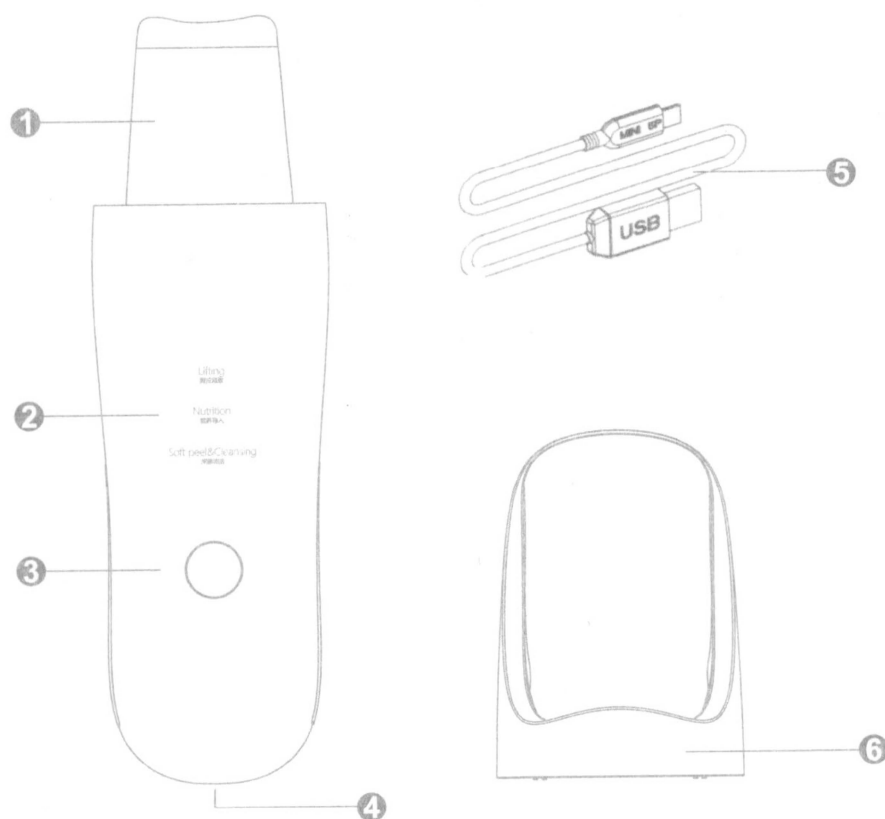

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Ultrazvuková špachtle | 4 | microUSB napájecí port |
| 2 | Módy použití | 5 | microUSB napájecí kabel |
| 3 | Tlačítko pro zapnutí a změny módu | 6 | základna |

Jak nabíjet

1. připojte zařízení k dodaného micro USB kabelu a poté jej zapojte do microUSB slotu v zařízení.
2. použijte napájecí adaptér se specifikacemi alespoň 5V/1A

Průvodce funkcemi

- 1 skládá se ze tří režimů: režim jemného peelingu a čištění ,režim importu živin a režim hloubkového čištění.
- 2 Tři módy lze ovládat tlačítkem, když kontrolka vzoru bliká (silně), klikněte znovu, kontrolka se rozsvítí přestane blikat a dlouho svítí, zobrazuje plné nabití a připravenost k použití.
(Při nízké kapacitě baterie vydá zařízení 10 varovných „pípnutí“ a automaticky se vypne.)

Lifting

1 V tomto režimu. kladné ionty produkované přístrojem mohou zmenšit póry, zvětšit je pružnost pokožky, eliminuje jemné linky a vrásky

2 Jak jej použít?

Krok 1: stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1,5 sekundy a poté zvolte Lifting, když kontrolka bliká (silně) klikněte znovu, indikátor přestane blikat a dlouho svítí, značí že je zařízení nabitě a připravené k použití.

Krok 2: naneste výživný krém nebo pleťovou masku, stiskněte tlačítko a pomocí špachtle se dotkněte pokožky.

Výživový režim

1 V tomto režimu podpořte pokožku vstřebávat živiny, jako je vitamín C a minerály, proto s použitím tohoto módu spolupracujte na použití

Chraňte pokožku účinek je zřetelnější s produktem, jako je bělicí mléko, obsahuje vitamín C, vitamín A a vitamín E.

2 Jak používat

Krok 1: stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1,5 sekundy při spuštění, a když kontrolka začne blikat (silně), indikátor přestane blikat a bude dlouho svítit, a je připraveno k použití.

Krok 2: naneste výživný krém nebo pleťovou masku, stiskněte tlačítko a pomocí špachtle se dotkněte pokožky.

- Kruhová masáž na obličeji. Pro nejlepší účinek je dobré masírovat po dobu 2-3 vteřin.

Režim trvá 10 minut na 1 ošetření a po 1 ošetření se automaticky vypne.

Režim jemného peelingu a čištění

1 Ultrazvukové vlny o frekvenci 25 kHz generované v tomto režimu dokonale působí na pokožku.

2 Jak používat

Krok 1: stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1,5 sekundy při spuštění a poté vyberte Soft peel & Cleansing, když kontrolka módu bliká (silně), klikněte znovu, kontrolka přestane blikat a dlouho se rozsvítí, zařízení je připraveno k použití.

Krok 2: Navlhčete pokožku gázou nebo vatovým tamponem.

Krok 3: Stiskněte tlačítko. pomocí špachtle se dotkněte pokožky a pohybujte třením, po dobu trvání módu tedy 15 minut.

Po programu se přístroj automaticky vypne.

3 Hluboké čištění

Naneste přípravek na obličej a silikonovou hlavicí naneste na kovový proužek silným odstraňovačem make-upu.

Poté zapněte režim Soft peel & Cleansing a použijte (více síly).

Jemně kružte po obličeji, dokud neodstraníte veškerý make-up a neodstraníte veškeré nečistoty, které se skrývají uvnitř vašich pórů.

Řešení problémů

Nelze zapnout

- 1 Stiskněte tlačítko napájení na déle než 2 sekundy. Zařízení se nezapne jen po krátkém stisknutí
- 2 Nabíjejte zařízení 2 hodiny a zkuste to znovu

Nelze nabíjet

- 1 Zasuňte adaptér do jiné zásuvky a zkuste to znovu.
- 2 Vytáhněte kabel a znovu jej vložte do portu.
- 3 Zkontrolujte, zda uvnitř nabíjecího portu nebo na adaptéru nejsou nečistoty
- 4 vyměňte adaptér nebo nabíjecí kabel.

Žádný výstup

1 Zkontrolujte, zda jste zvolili požadovaný režim. pokud kontrolky LED stále svítí mezi 3 režimy, znamená to, že jste režim nezvolili.

Znovu stiskněte tlačítko napájení a vyberte 1 režim.

- 2 Možná, že se do zařízení dostala voda, dejte jej prosím na 1-2 dny na suché místo a zkuste to znovu.
- 3 Kontaktujte prodejce

Nepodařilo se přepnout do jiného režimu

- 1 Stiskněte tlačítko větší silou, abyste se ujistili, že jste stiskli dobře.
- 2 Možná, že do zařízení vnikla voda, uložte jej prosím na 1-2 dny na suché místo a zkuste to znovu.
- 3 Kontaktujte prodejce

Žádný výstup na nižší úrovni, ale výstup na vyšší úrovni

- 1 Možná se do zařízení dostala voda, dejte jej prosím na 1-2 dny na suché místo a zkuste to znovu.
- 2 Kontaktujte prodejce.

Varování

<Bezpečnostní pokyny umožňují> uživatelům používat produkty bezpečněji a vhodněji, aby se předešlo potenciálním nehodám nebo nebezpečím při používání.

1 V případě jakýchkoli nežádoucích účinků přestaňte tento produkt používat.

2 Pacienti s infekčními chorobami, srdeční vadou, abnormálním krevním tlakem a kožními chorobami by se měli poradit s lékařem před použitím tohoto produktu.

3 Pokud používáte lékařské potřeby nebo jste byli ošetřeni odřeninami, před použitím tohoto produktu se poraďte se svým dermatologem.

4 Nepoužívejte při vysoké teplotě nebo vlhkém prostředí

5 Uchovávejte tento produkt mimo zdroje vody a ohně. Buďte opatrní, abyste se během deštivých dnů vyhnuli úrazu elektrickým proudem.

6 Zařízení není vhodné pro děti a neslyšící.

7 Produkt nepouštějte, nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, mohlo by dojít k poškození produktu nebo k poruše.

8 Před prvním použitím tento výrobek nabíjete.

9 Tento produkt je recyklovatelný a sbírá se odděleně.

10 Po použití zařízení důkladně očistěte

Před likvidací je nutné z produktu vyjmout baterii. Provedte následující kroky:

- Před likvidací je nutné z výrobku vyjmout baterii.
- Sejměte plášť produktu, odstraňte šroub a sejměte vnitřní plášť.
- Odstraňte vnitřní související vodiče, vyjměte baterii.
- Předtím vypněte napájení produktu, vyjměte baterii.
- Baterie by měla být umístěna bezpečně

Distributor a dovozce pro ČR

Servatech s.r.o.

Záběhlická 134/95, Praha 10, 106 00

info@servatech.cz / +420 277 279 330